



2013年度末 キャンペーン

期間：2014年1月6日～2014年3月31日納品分

スターキットプレゼント!

IEFチップ
(pH3-10/4-7)
計10回分PAGEチップ
(濃度7.5%/10.0%/12.5%)
計10回分溶液チップ
10回分試薬セット
10回分タンパク質解析の
2次元電気泳動を自動化

Auto 2D

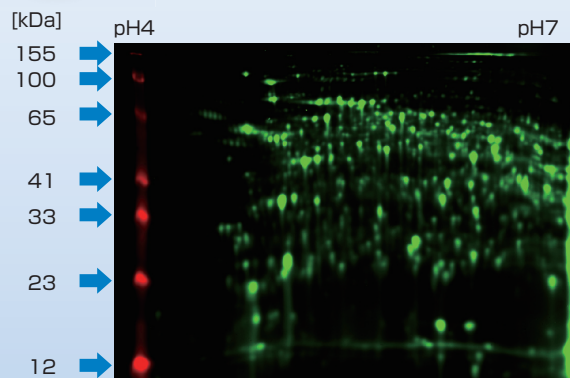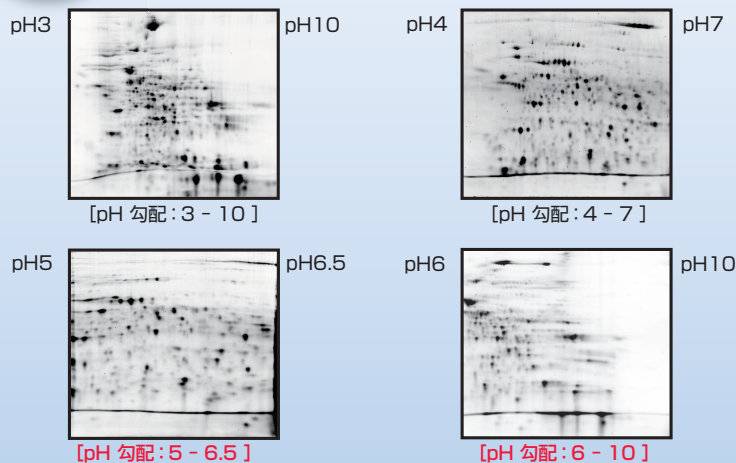BM-100(本体)
希望小売価格
5,000,000円(税別)分子量
マーカー
対応!●IEFチップ: pH4-7
●PAGEチップ: 12.5%
ポリアクリルアミドゲル●試料: 蛍光ラベル化したマウス
肝臓可溶性タンパク質 (2μg)ナロー
レンジ
IEFチップ
拡充!

仕様

本体

外形寸法 (mm)	幅240×奥行428×高さ445 (使用時:高さ536)
質量	約17kg
電源	AC100V、50/60Hz、定格容量:160VA (最大)
制御PC	表示部 タッチパネルTFT液晶 (8インチ)
	記録デバイス CFドライブ Compact Flash Card (システム)
	DFドライブ 160GB 2.5inchHDD
その他	USB2.0×2ポート
使用環境温度	5～35℃
使用環境湿度	35～85%RH
付属品	電極チップ、3P→2P変換プラグ、取扱説明書、保証書

チップ

IEFチップ (1次元目)	外形寸法 (mm)	幅60×奥行1.2×高さ23
	保存温度	-20℃ (冷凍)
PAGEチップ (2次元目)	外形寸法 (mm)	幅70×奥行70×高さ12
	保存温度	4℃ (冷蔵)

商品名	形名	内容	入数	希望小売価格 (税抜)	保存消費期限	保存温度
電極チップ	BM-1E	分子量マーカー対応	1	150,000円	特になし	常温
溶液チップ	BM-1S	分子量マーカー対応	10	10,000円	特になし	常温
IEFチップ	IEFチップ	BM-114070 pH4-7	10	20,000円	1年	冷凍 -20℃
		BM-113010 pH3-10				
		BM-114055 pH4-5.5	10	24,000円	1年	冷凍 -20℃
	ナローpH レンジ IEFチップ	BM-115065 pH5-6.5				
		BM-116010 pH6-10				
		BM-117010 pH7-10				
PAGEチップ	PAGEチップ	BM-12075 7.5%	10	30,000円	6ヵ月	冷蔵 4℃
		BM-12100 10.0%				
		BM-12125 12.5%				
試薬	試薬	<通常ご利用品> BM-1RYSJ1	泳動 50回分	28,000円	未開封で 6ヵ月	膨潤液キット (粉末)のみ室温 その他 冷蔵 4℃
		<低分子量 (30kDa以下 が目安) ご利用の場合> BM-1RYTJ1		30,000円		

※納期は、お問い合わせください。

※電極チップは、100回の泳動で交換の目安としてください。
その他のチップは、1回毎に消費します。

※全ての試薬に、Ampholytesおよびマーカーは含まれておりません。


※上記商品の送料は、離島を除き、国内一箇所に限り、価格に含まれます。

●画面はハメコミ合成です。

本リーフレット掲載商品には、ご購入の際、消費税等が別途付加されます。配送・設置・付帯工事及び商品引き取りなどの費用は、販売店におたすねください。


高速分離

■2次元電気泳動によるタンパク質解析の流れ

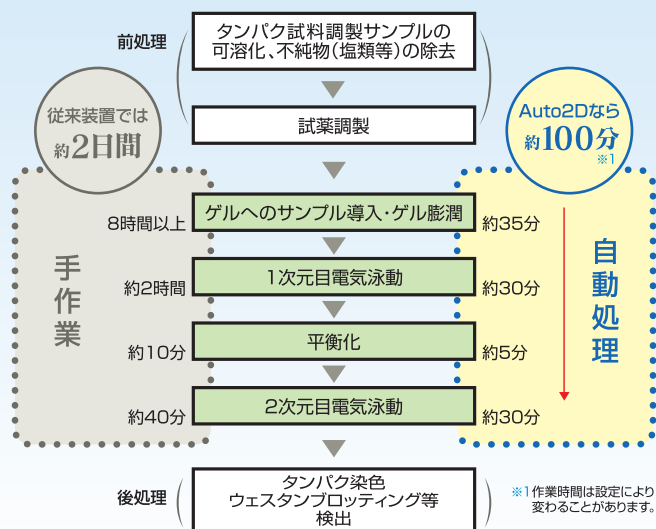

再現性

■マウス肝臓可溶性タンパク質を5回分離した結果

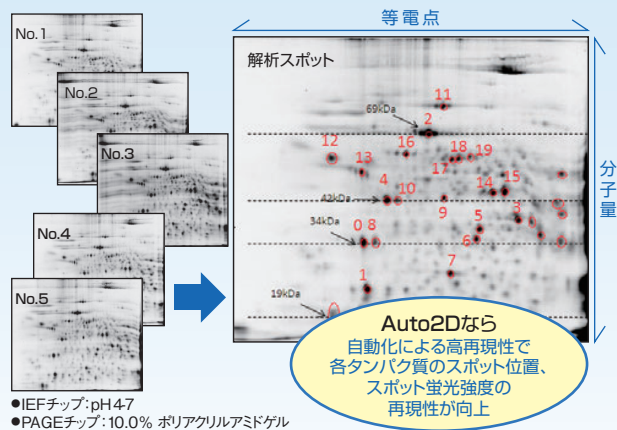

●評価のまとめ (評価スポット20個 (n=5))

スポットの蛍光強度平均	スポット位置ばらつき等電点	スポット位置変動誤差C/%	スポット解像度分子量	スポット解像度等電点
11.3%	0.055pH	4.38%	2kDa	0.02pH

高分解能


■ヒトビメンチンタンパク質のリン酸化パターンの検出

Auto2Dを用いてヒト悪性脳腫瘍タンパク質を2次元電気泳動した後、抗ビメンチン抗体を用いて検出した結果

●IEFチップ:pH4-7 ●PAGEチップ:10.0% ポリアクリルアミドゲル

結果 ヒト悪性脳腫瘍由来ビメンチンタンパク質のN末端切断シフトおよびリン酸化シフトを同時に検出できた

癌の悪性化に関係のあるビメンチンタンパク質のAuto2D-Western Blotting結果

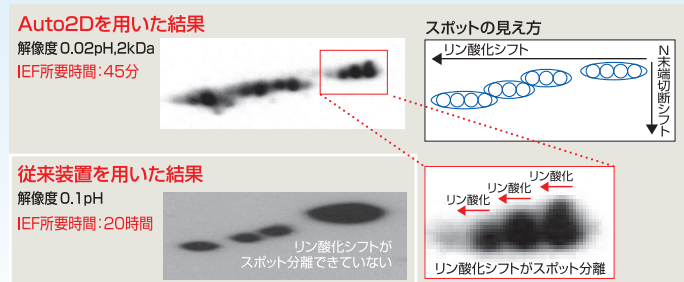


共同開発者
熊本大学大学院生命科学研究部: 荒木令江先生 提供

簡単操作

■タッチパネルで簡単操作のコントロールパネル

タンパク質分析チップへの試薬の投入から、各種設定・スタートまでモニター画面の手順を確認しながら行えるので間違いが防げます。

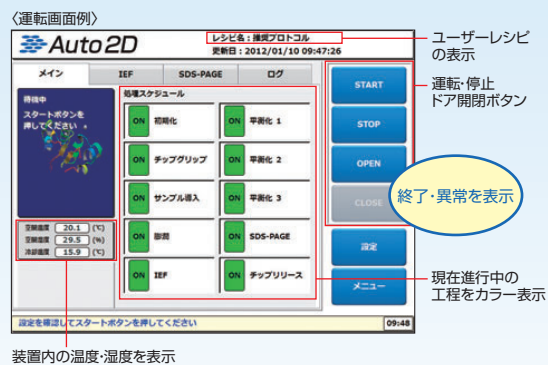


装置内の温度・湿度を表示

タンパク質分析チップセット

IEFチップ(1次元目) PAGEチップ(2次元目)

蛍光分析システムとしてのご提案

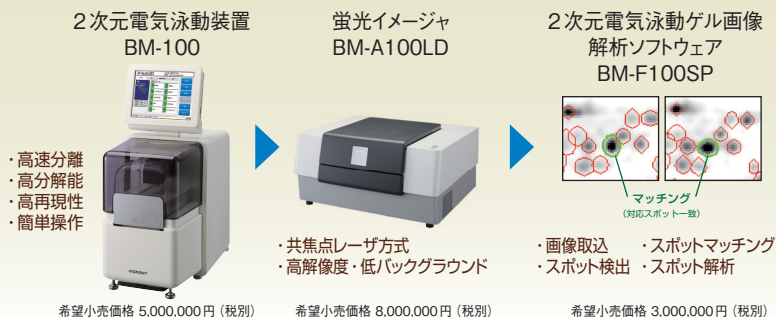

タンパク質の差異解析

ヒト正常細胞と不死化(癌化)細胞のタンパク質の比較解析


Auto2Dを用いて蛍光試薬Aで標識したヒト正常繊維芽細胞と蛍光試薬Bで標識した不死化(癌化)細胞のタンパク質を2次元電気泳動した結果

(赤:試薬Aの蛍光画像、緑:試薬Bの蛍光画像)

●IEFチップ:pH4-7

●PAGEチップ:10.0% ポリアクリルアミドゲル

結果 不死化(癌化)に伴い変化するスポット群を検出できた

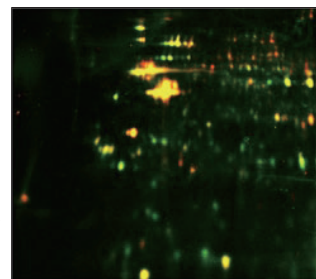

(地独)東京都健康長寿医療センター研究所・老化機構研究チーム: 戸田年穂先生、岩本真知子先生 提供



本製品は、科学技術振興機構(JST)先端計測分析技術・機器開発プログラムによる成果です。

●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●表示部は、ハメコ合成で実際の表示とは色調など若干異なります。

和光純薬工業株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号
TEL: 06-6203-2759 (機器システム部)
東京支店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町四丁目5番13号
TEL: 03-3270-8124 (機器システム部)
●九州営業所 TEL: 092-622-1005 (FAX) ●中国営業所 TEL: 082-285-6381 (FAX)
●東海営業所 TEL: 052-772-0788 (FAX) ●藤沢営業所 TEL: 0466-29-0351 (FAX)
●筑波営業所 TEL: 029-858-2278 (FAX) ●東北営業所 TEL: 022-222-3072 (FAX)
●北海道営業所 TEL: 011-271-0285 (FAX)
URL: www.wako-chem.co.jp
お問い合わせ: www.wako-chem.net/bms
機器お見積もり: www.wako-chem.net/estimate/index.php

このリーフレットの内容は、2014年1月現在のものです。